


מתקן טיפול פוטותרפיה



מתקן הLED מורכב מ-4 תת יחידות בעלות 132 נורות LED (סה"כ 528 מקורות אור), ניתן לקפל את המתקן או להחזיק אותו פתוח, מתאים למגוון טיפולים.

ניתן להנות ממגוון הטיפולים על ידי בחירה בתוכנית האור הרצויה מבין האפשרויות כמו הבהרה, החלקה, המרצה, הרגעה.

אביזרי המכשיר:

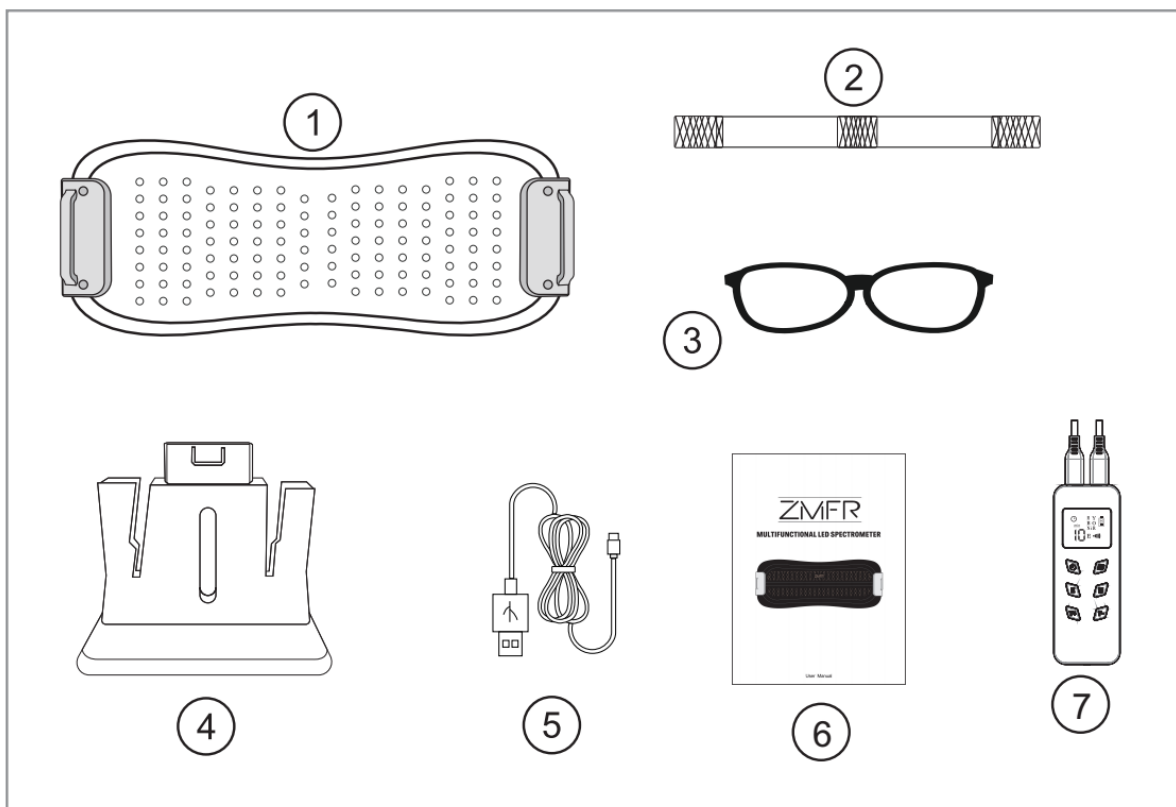

מתקן פליטת אור (1)	אבזם ניילון (2)	משקפת הגנה לעיניים (3)	מחזיק 2X יחידות (4)
כבל טעינה (5)	הוראות שימוש (6)	שלט פיקוד למכשיר (7)	

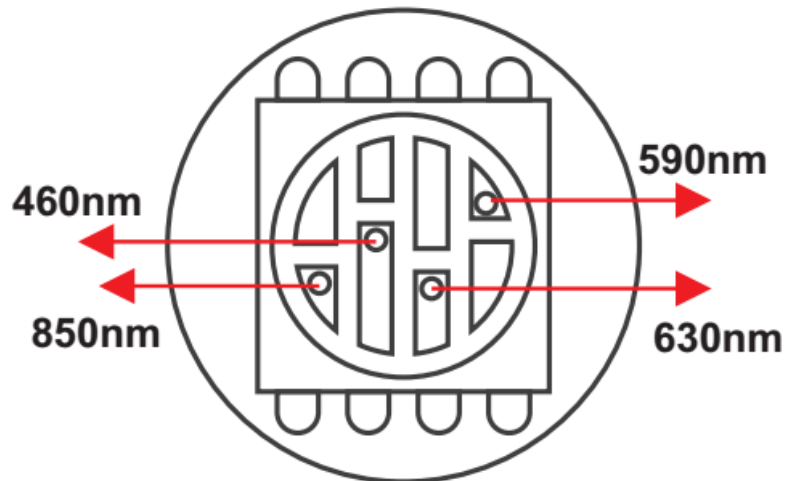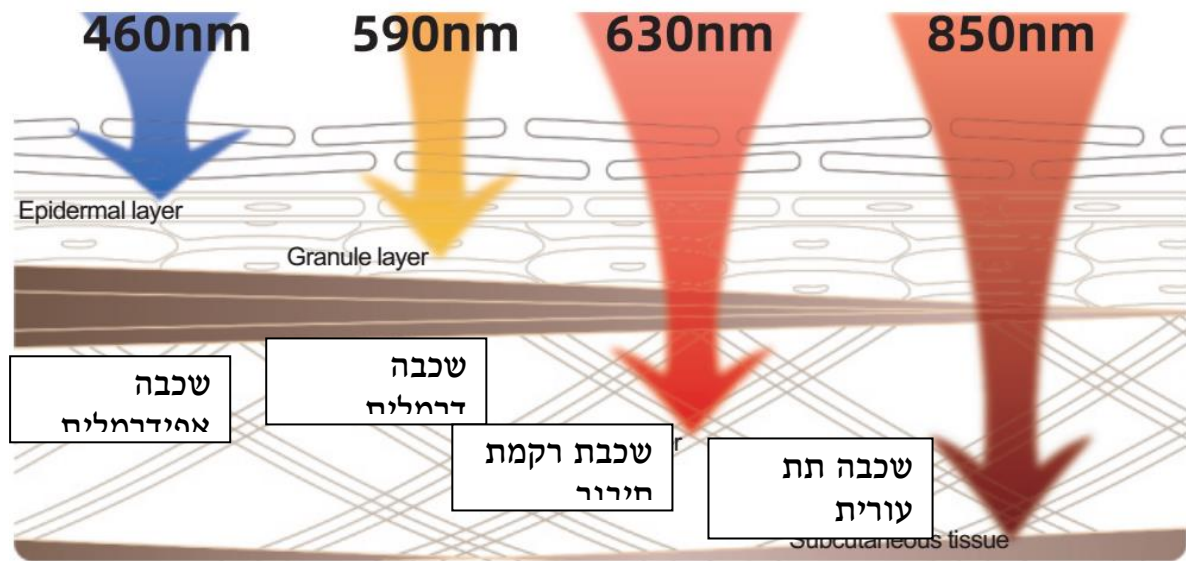


אור אדום $630nm$ – אנטי אייג'ינג, המרצת ייצור קולגן, הגברת אלסטיות בעור.

אור כחול $460nm$ – להשמדת חיידקי אקנה, הרגעת דלקות וצלקות, הגברת שחלוף תאי וספיגת חמצן, הבהרת העור.


אור צהוב $590nm$ – איזון מרקם העור, המרצת תאי דם אדומים, לצמצום אדמומיות, נפיחות וקמטים קלים, מגביר את איזון העור.

אור אינפרא-אדום $850nm$ – לתיקון העור, האצת חילוף החומרים התאי, האצת זרימת הדם, הגברת הלחות בעור.

אור אדום $+630nm$ אור כחול $460nm$ – לתיקון ושיקום העור, לקבלת עור בריא ומאוזן.

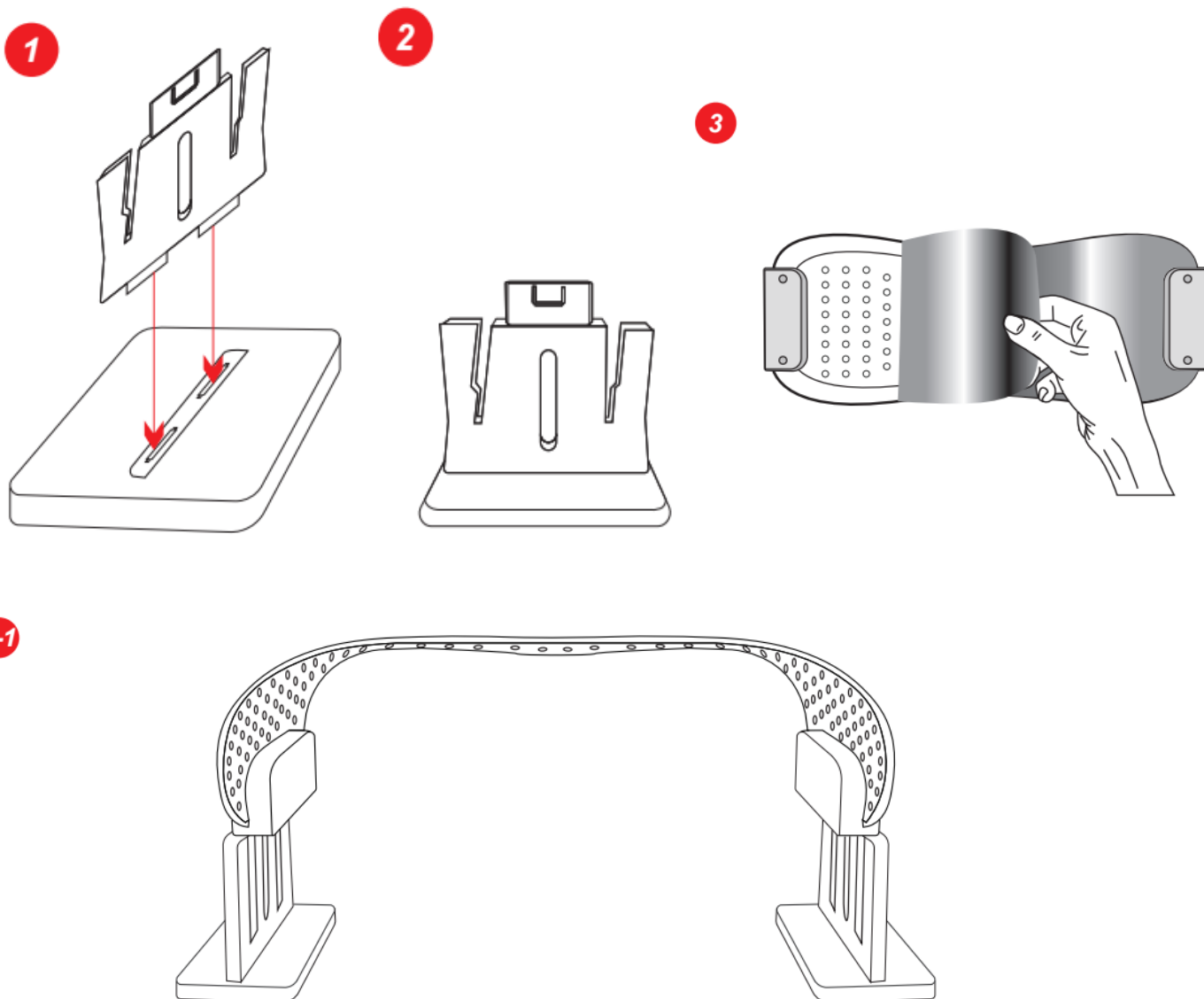


Complete assembly (lying flat)

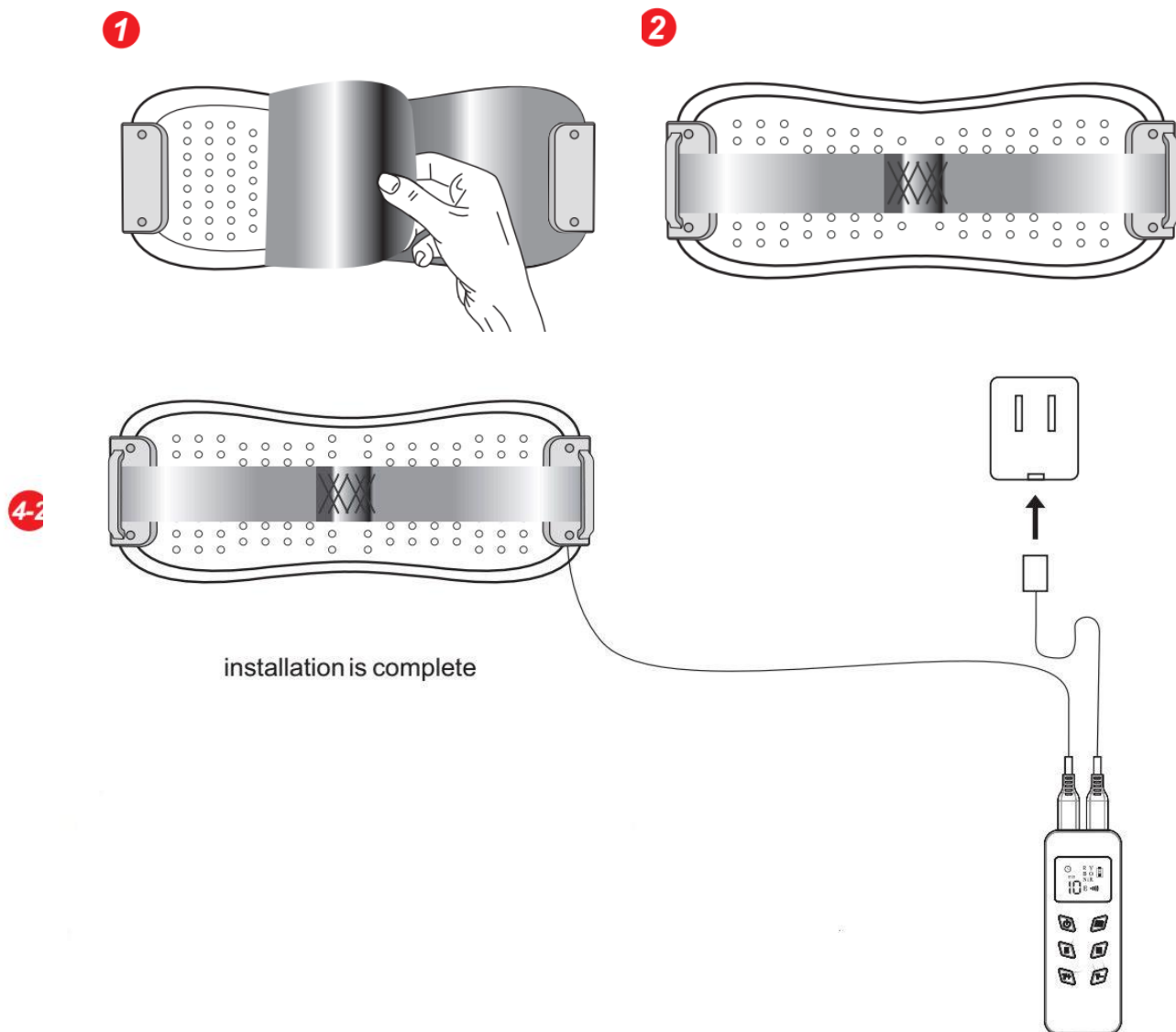


להדלקת המערכת יש ללחוץ על לחיץ ההפעלה לחיצה ארוכה (1-2 שניות).
ניתן להוסיף את גלי האינפרא אדום לכל אור על ידי שימוש במתג הייעודי.
מתג E – משמש לשינוי העוצמה מבין 3 העוצמות האפשריות.
מתג M – שינוי מקור האור מבין 4 האפשרויות.
מתג H+ – משמש להוספת זמן תאורה.
מתג H- – משמש לקיצור זמן התאורה. (10/15/20/25/30 דקות).

הצעות לטיפולים:

1

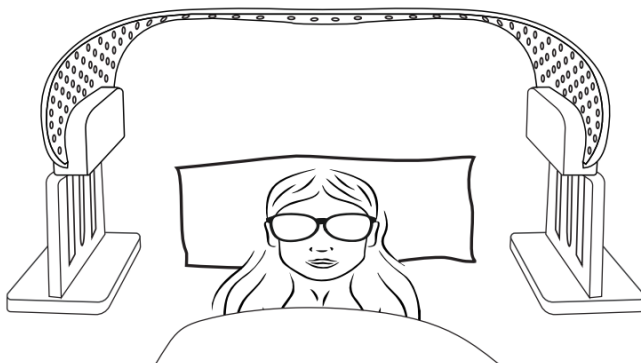


2

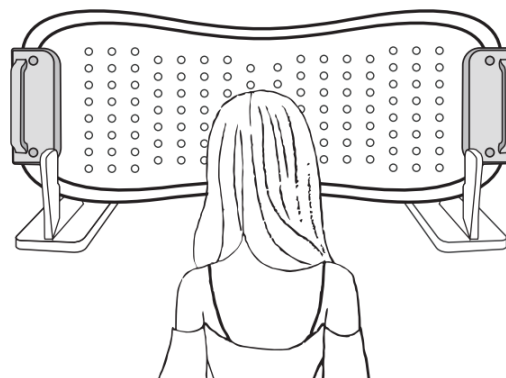


(1) טיפול בשכיבה- מחייב שימוש במשקפי מגן.

(2) טפול בישיבה – מחייב שימוש במשקפי מגן.

3

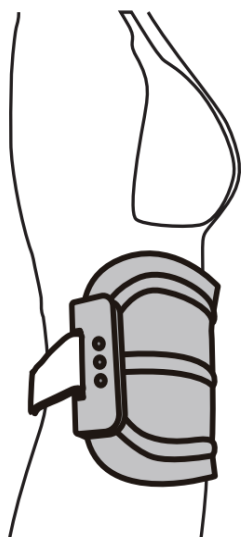

4

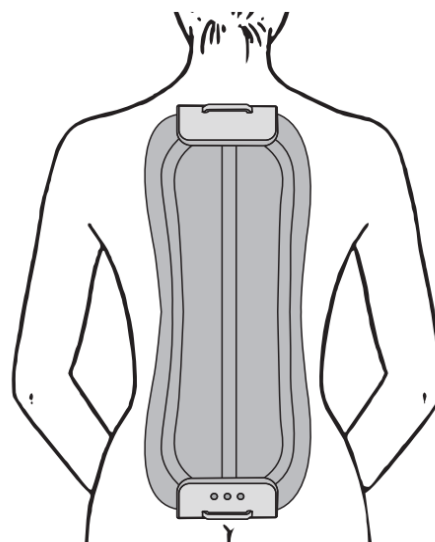

(3) טיפול ליבה.

(4) טיפול בגב.

אזהרות:

לפני השימוש במוצר בפעם הראשונה יש לבצע מבחן רגישות.

יש להניח את המכשיר על הזרוע, להדליק ולתת למכשיר להאיר 10 דקות. במידה ונוצרת אדמומיות חריגה או גירוד או כל תופעת אי נוחות אחרת יש להפסיק את השימוש במוצר ולברר רגישות לאור.

יש להשתמש במוצר על עור נקי ללא חומרי איפור או הגנה מכל סוג.

לאחר השימוש העור עשוי להראות אדמומי – זוהי תגובה רגילה של העור והוא ישוב לגוון הטבעי שלו תוך כשעתיים לערך.

במידה וישנה תחושת שריפה יש להפסיק את השימוש במוצר מיידית.

לניקוי המוצר יש להשתמש במגבת רכה עם מעט לחות.

הסבר לשימוש נכון בשלט הפיקוד של המכשיר:


יש להטעין עד למילוי את המכשיר לפני השימוש הראשון במוצר.


זמן טעינת המכשיר הוא 3-4 שעות, כל עוד נורית האינדיקציה מהבהבת.

כאשר נורית הביקורת דולקת קבוע- המכשיר טעון במלואו.

אין להשתמש במכשיר בעת הטעינה.



שימוש במכשיר בעת ההטענה שלו עלול לפגוע בתוחלת החיים של הסוללה.

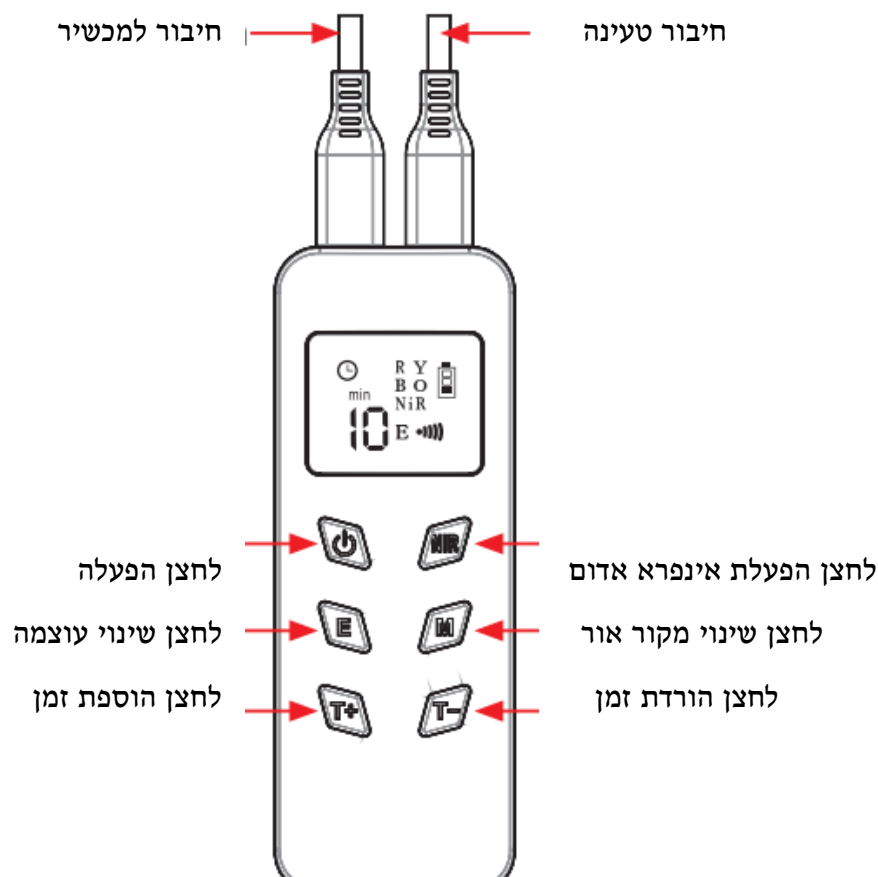

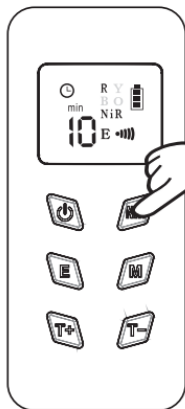



יש ללחוץ על לחצן ההפעלה לחיצה ארוכה
התצוגה תראה R כשהאור האדום 630nm נדלק
בברירת המחדל.

ניתן להוסיף את האינפרא אדום 850nm לכל
סוג אור שרוצים על ידי לחיצה על המתג
המיועד.

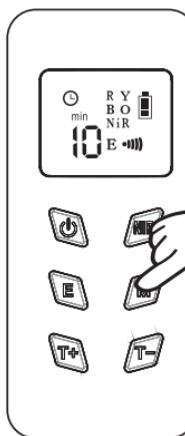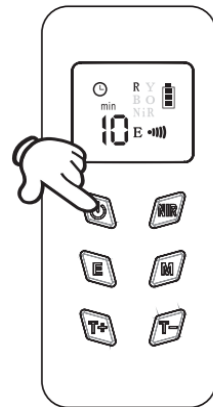


כעת יש לכוון את העוצמה הרצויה מבין 3
העוצמות.

כדי להחליף סוג האור יש ללחוץ על לחיצת הMin
כשהתצוגה מראה R- אור אדום 630nm
כשהתצוגה מראה B- אור כחול 460nm
כשהתצוגה מראה Y- אור צהוב 590nm
כשהתצוגה מראה RB- אור סגול 630nm+460nm

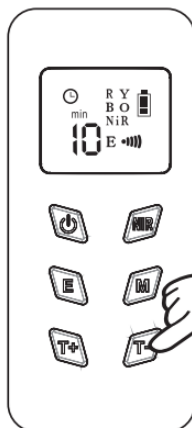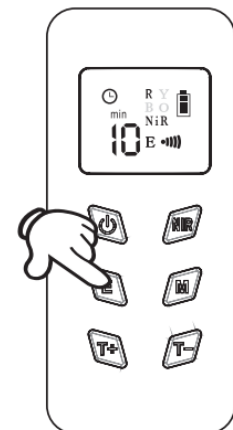

כדי להוסיף שמן לטיפול יש ללחוץ על לחיצת ה+
כדי להוריד את זמן הטיפול יש ללחוץ על לחיצת
ה-

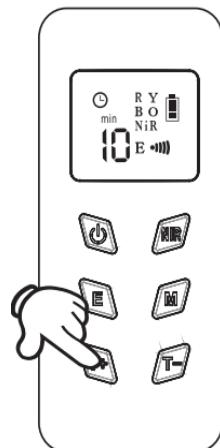

נתונים טכניים

מידות אריזה חיצונית: 55x240x574 מ"מ

משקל: 555 גרם

הספק: 6W

טעינה: 5VDC 2A type C